



## Cinuforce® Neusspray

forte

+ eucalyptus

Neusverkoudheid  
Verstopte neus

### Instructies voor gebruik

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in over waar u op moet letten bij het gebruik van dit medische hulpmiddel. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Wat is Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus is een hypertone oplossing die natuurlijk zeezout, povidon, cineol, mentholaroma en gezuiverd water bevat.

Het bevat geen conserveringsmiddelen of drijfgassen.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus is een medisch hulpmiddel dat bedoeld is om de verstopte neus op natuurlijke wijze vrij te maken en zo de neusademhaling te herstellen.

Het helpt om minder decongestivum neussprays te gebruiken en heeft geen gewenningseffect.

Symptomen zoals jeuk, een loopneus en niezen worden verlicht.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus reinigt de neusholte effectief, spoelt overtollig slijm en onzuiverheden weg en verwijdert korstjes.


Het helpt de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus ondersteunt de vermindering van allergische symptomen door het uitwassen van allergenen.

Het hydrateert de neus en helpt tegen een droge neus.

De aromatische stof eucalyptus geeft een onmiddellijk gevoel van verlichting en frisheid. Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

**Hoe Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus gebruiken**  
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 1-2x sprayen per neusgat, naar behoefte meerdere keren per dag. Kinderen en mensen die Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus niet zelfstandig kunnen gebruiken, moeten worden geholpen bij het aanbrengen van het product.

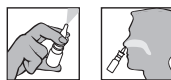

Voordat u Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus voor de eerste keer gebruikt, moet u de dop eraf halen en 2-3 keer pompen om de lucht uit de pomp te laten ontsnappen. Snijd de tip niet door.

Als de sproeifunctie niet goed werkt (wat kan gebeuren als de fles niet rechtop staat), drukt u het pompmechanisme een paar keer recht op.

1. Verwijder de dop van de fles.
2. Houd de fles vast met uw wijs- en middelvinger aan weerszijden van de neusgaten en uw duim onder de fles. Buig uw hoofd iets naar voren en sluit één neusgat door zachtjes met uw vinger van de andere hand tegen de zijkant van uw neus te drukken.
3. Breng het uiteinde van de spray in uw neusgat en begin zachtjes in te ademen.
4. Druk het pompje snel en stevig in om in uw neusgat te sprayen. Blijf rustig ademen door het neusgat.
5. Breng het uiteinde van de spray in uw andere neusgat en herhaal de hierboven beschreven stappen.
6. Veeg het blootliggende uiteinde van de fles af met een schone, pluisvrije doek.
7. Plaats de dop terug op de fles.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**  
Bij correct gebruik zijn er geen speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen vereist voor het gebruik van Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus.

Voor een veilige hygiëne mag elk neussprayflesje slechts door één persoon worden gebruikt.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus moet worden gebruikt bij kamertemperatuur.

**Hoe Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus bewaren**  
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de bovenzijde van het doosje en op het etiket.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C

### Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Er zijn echter overgevoelheidsreacties beschreven voor aromatische ingrediënten die worden gebruikt voor het aromatiseren. Raadpleeg uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

### Contra-indicaties

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus mag niet worden gebruikt in geval van kinkhoest en pseudokroep.

### Interactie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties bekend.

### Zwangerschap en borstvoeding

Op dit moment zijn er geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit medische hulpmiddel gebruikt als u:

- zwanger bent of borstvoeding geeft
- niet zeker bent of u zwanger bent of niet

**Inhoud van Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus en overige informatie**  
20 ml oplossing

Eén verstuiving bevat 0,14 ml oplossing.

Cinuforce Neusspray forte + eucalyptus kan tot 12 maanden na de eerste opening worden gebruikt.

### Ingrediënten

Natuurlijk zeezout, gezuiverd water, povidon, cineol en mentholaroma.



### Distributeur België

A.Vogel N.V.,  
Bossstraat 54,  
BE-3560 Lummen  
013/35.89.40  
www.avogel.be  
info@avogel.be

Datum van informatie april 2021.

**Fabrikant:**  
URSATEC GmbH  
Marlinger Weg 4  
D-66636 Tholey  
Duitsland



## Cinuforce® Spray nasal


forte

+ eucalyptus

Rhume  
Nez bouché

**Comment utiliser Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus ?**

Adultes et enfants à partir de 6 ans : 1-2 vaporisations par narine, selon les besoins plusieurs fois par jour. Les enfants et les personnes incapables d'utiliser seules Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus doivent être aidés lors de l'application du produit.

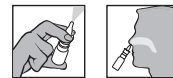

Avant d'utiliser Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus pour la première fois, retirez le bouchon et pompez à 2 ou 3 reprises pour libérer l'air de la pompe. Ne coupez pas l'embout.

Si la fonction de vaporisation est altérée (ce qui peut se produire si le flacon n'est pas positionné verticalement), appuyez plusieurs fois sur le mécanisme de la pompe en position verticale.

1. Retirez le bouchon du flacon.
2. Tenez le flacon en plaçant l'index et le majeur de part et d'autre du repose-doigts et le pouce sous le flacon. Penchez légèrement la tête vers l'avant et bouchée une narine en appuyant doucement sur le côté du nez avec le doigt de l'autre main.
3. Insérez l'embout du spray dans votre narine et commencez à inspirer doucement.
4. Enfoncez rapidement et fermement la pompe pour vaporiser dans votre narine. Continuez à respirer doucement par la narine.
5. Insérez l'embout du spray dans l'autre narine et répétez les étapes décrites ci-dessus.
6. Essayez l'embout exposé du flacon avec un chiffon propre et non pelucheux.
7. Remettez le bouchon sur le flacon.

### Avertissements et précautions

En cas d'utilisation correcte, aucun avertissement ou aucune précaution particulières ne sont requis pour l'utilisation de Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus.

Pour des raisons d'hygiène, chaque flacon de spray nasal ne doit être utilisé que par une seule personne.

Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus doit être utilisé à température ambiante.

### Comment stocker Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus ?

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le dessus de la boîte et sur l'étiquette.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants. À conserver à une température inférieure à 25°C.

### Effets secondaires

Il n'y a pas d'effets secondaires connus.

Toutefois, des réactions d'hypersensibilité ont été décrites en ce qui concerne les ingrédients aromatisés utilisés pour l'aromatisation. En cas d'effets indésirables, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contre-indications

Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients.

Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus ne doit pas être utilisé en cas de coqueluche et de faux croup.

#### Interaction avec d'autres médicaments

Il n'y a pas d'interactions connues.

#### Grossesse et allaitement

Il n'existe actuellement aucune donnée concernant l'utilisation de Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus pendant la grossesse et l'allaitement.

Consultez votre médecin ou un pharmacien avant d'utiliser ce dispositif médical dans les cas suivants :

- Vous êtes enceinte ou allaitez
- Il est possible que vous soyez enceinte

#### Contenu de Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus et autres informations

20 ml de solution

Une vaporisation contient 0,14 ml de solution.

Cinuforce Spray nasal forte + eucalyptus peut être utilisé pendant 12 mois après la première application.

#### Ingédients

Sel de mer naturel, eau purifiée, povidone, cinéol et arôme de menthol



#### Distributeur pour la Belgique

A.Vogel N.V.,  
Bosstraat 54,  
BE-3560 Lummen  
013/35.89.40  
www.avogel.be  
info@avogel.be



Fabricant:  
URSATEC GmbH  
Marpinger Weg 4  
D-66636 Tholey  
Allemagne

Date de l'information avril 2021.

## A.Vogel Cinuforce® Nasenspray forte + Eukalyptus Schnupfen Verstopfte Nase

#### Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus beginnen. Sie enthalten wichtige Informationen darüber, was bei der Anwendung dieses Medizinprodukts zu beachten ist. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

#### Was ist Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus und wofür wird es angewendet?

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus ist eine hypertensive Lösung mit natürlichem Meersalz, Povidon, Cineol, Menthol-Aroma und gereinigtem Wasser.

Es enthält keinerlei Konservierungsmittel oder Treibmittel.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus ist ein Medizinprodukt, das eine verstopfte Nase auf natürliche Weise zum Abschwellen bringt und damit die Nasenatmung wiederherstellt.

Es trägt dazu bei, weniger abschwellende Nasensprays zu verwenden, und hat keinen Gewöhnungseffekt.

Symptome wie eine juckende und laufende Nase und Niesen werden gelindert.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus reinigt die Nasenhöhle effektiv, spült überschüssigen Schleim und Schmutz aus und löst Verkrustungen.

Damit trägt es zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität bei.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus unterstützt die Reduzierung allergischer Symptome durch Ausspülen von Allergenen.


Es befeuchtet die Nase und trägt zur Linderung von Nasentrockenheit bei.

Der Aromastoff Eukalyptus sorgt für ein sofortiges Gefühl der Erleichterung und Frische.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus ist für Kinder über 6 Jahren und Erwachsene geeignet.

#### Wie ist Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus anzuwenden?

**Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:** 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen, je nach Bedarf mehrere Male am Tag.  
Kinder und Personen, die Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus nicht selbstständig anwenden können, sollten bei der Anwendung des Produkts unterstützt werden.

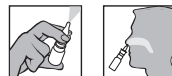

Vor der ersten Anwendung von Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus die Kappe abnehmen und 2- bis 3-mal pumpen, um die Luft aus der Pumpe zu entfernen. Die Spitze nicht abschneiden.

Sollte die Sprühfunktion beeinträchtigt sein (zum Beispiel bei schief stehender Flasche), den Pumpemechanismus in aufrechter Position mehrmals betätigen.

1. Die Kappe von der Flasche entfernen.
2. Die Flasche festhalten, indem Zeige- und Mittelfinger auf die beidseitigen Fingerauflagen und der Daumen von unten an den Boden der Flasche gelegt werden. Den Kopf leicht nach vorne beugen und ein Nasenloch verschließen, indem mit dem Finger der anderen Hand leicht seitlich gegen die Nase gedrückt wird.
3. Die Spitze des Sprays in das Nasenloch einführen und sanft einatmen.
4. Die Pumpe in einer schnellen und festen Bewegung nach unten drücken, um einen Sprühstoß in das Nasenloch abzugeben. Weiter sanft durch das Nasenloch atmen.
5. Die Spitze des Sprays in das andere Nasenloch einführen und die obigen Schritte wiederholen.
6. Die freiliegende Spitze der Flasche mit einem sauberen fusselfreien Tuch abwischen.
7. Die Kappe wieder auf die Flasche aufsetzen.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei korrektem Gebrauch sind für die Anwendung von Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus keine Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Aus hygienischen Gründen sollte jede Nasenspray-Flasche nur von einer Person verwendet werden.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus sollte bei Raumtemperatur angewendet werden.

#### Wie ist Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus aufzubewahren?

Nach dem auf der Oberseite des Umkartons und auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Für Kinder unzugänglich und ausser Sicht aufbewahren. Unter 25°C lagern.

#### Nebenwirkungen

Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen.

Für aromaverleihende Inhaltsstoffe sind jedoch Überempfindlichkeitsreaktionen beschrieben worden. Wenden Sie sich bei Auftreten von Nebenwirkungen an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Gegenanzeigen

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus darf bei Keuchhusten und Pseudokrupp nicht angewendet werden.

#### Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln

Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Derzeit liegen keine Daten zur Anwendung von Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Wenden Sie sich in folgenden Fällen an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke, bevor Sie dieses Medizinprodukt anwenden:

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind

#### Inhalt von Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus und weitere Informationen

20 ml Lösung

Ein Sprühstoß enthält 0,14 ml Lösung.

Cinuforce Nasenspray forte + Eukalyptus kann nach dem Anbrechen 12 Monate lang angewendet werden.

#### Zutaten

Natürliches Meersalz, gereinigtes Wasser, Povidon, Cineol und Menthol-Aroma



#### Verteiler Belgien

A.Vogel N.V.,  
Bosstraat 54,  
BE-3560 Lummen  
013/35.89.40  
www.avogel.be  
info@avogel.be



Hersteller:  
URSATEC GmbH  
Marpinger Weg 4  
D-66636 Tholey  
Deutschland

Datum der Information April 2021.



Te gebruiken tot (vervaldatum) / À utiliser jusqu'au (date de péremption) / Anwenden bis (Verfalldatum)

CE-symbol / Symbole CE / CE-symbol

Gebruiksaanwijzing lezen / Lire le mode d'emploi / Bitte Gebrauchsanweisung beachten

Lotnummer / Numéro de lot / Chargennummer

Temperatuurgrenzen / Limites de température / Temperaturgrenzen

Naam en adres van de fabrikant / Nom et adresse du fabricant / Name und Anschrift des Herstellers

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of doorboord is / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou perforé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

